

MEDIAID

Veterinarios para Oxímetros de Pulso **Sensores**



Sensor Lingual de pinza

El sensor lingual de pinza Mediaid es un sensor veterinario reusable apropiado para todos los perros, gatos y varios animales grandes. Las almoadillas reutilizables de silicon de este sensor ofrece adicional agarre a la lengua, que limita el movimiento del sensor y reduce interrupciones durante el monitoreo. El sensor contiene 4 almoadillas de silicon extras. El sensor lingual de pinza es resistente al agua y pueden facilmente limpiarse. Este sensor provee solamente datos de oximetria.

- Conector RJ12
REF/PN POX022-450
(usarse con los modelos 340V y 5340V)
REF/PN POX022-455
(usarse con los modelos 500V y 500VP)



Almoadillas de Silicon

Las almoadillas de silicon Mediaid para el sensor de pinza son removibles almoadillas que se pueden usar multiples veces. Esas almoadillas proveen adicional adherencia a la lengua para limitar interrupciones mientras monitorea. El paquete contiene 24 almoadillas de silicon resistentes al agua.


- REF/PN POX025-450



Sensor Rectal

Este sensor rectal veterinario provee lecturas al oximetro de pulso y un nucleo de datos de la temperatura. Es apropiado para animales grandes y pequeños. Un termistor en el sensor permite la temperatura corporal y la ilustra en la pantalla del oximetro de pulso. La temperatura puede ser mostrada intermitentemente cada dos minutos o cuando se requiera (°C o °F). Un doble sonido se escuchara cada vez que la temperatura se muestre.

- Conector RJ12
REF/PN POX022-650
(usarse con los modelos 340V y 5340V)
REF/PN POX022-655
(usarse con los modelos 500V y 500VP)

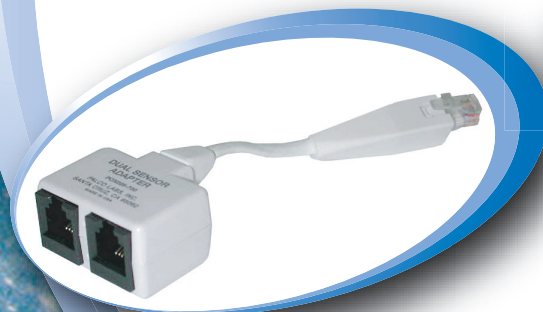

Adaptador Doble para Sensor

El adaptador doble para sensor es compatible con todos los oximetros de pulso de Mediaid. Este adaptador doble de sensor provee al sensor rectal y el sensor lingual de pinza poder usarse simultaneamente, proporcionando un nucleo de datos de temperatura y oximetria de pulso para animales que quizas afronten alguna obstruccion de la lecturas del oximetro de pulso en la sonda rectal.

- Conector RJ12
REF/PN POX025-700

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com